

Pleieseng QVINTETT LARGE



Funksjonelt arbeidsredskap med god liggekomfort

QVINTETT LARGE

Qvintett LARGE er en individuelt elektrisk regulerbar seng der alle sengens funksjoner styres fra et lett forståelig betjeningspanel. I tillegg til regulering av høyde, hjertebrett og bendel, gir Qvintett LARGE mulighet for et sitteleie med bendelen under horisontalen. Dette er spesielt egnet for personer som tilbringer mye tid i sengen. Sengen er utstyrt med aktiv rygg der hjertebrettet trekkes tilbake når det heves for å redusere skyveeffekten på huden.

Qvintett LARGE er konstruert for å forenkle håndtering, montering og transport av sengen. Sengen kan enkelt, og uten verktøy, demonteres i fire (fem) deler, noe som forenkler leveranse og monasje i trange rom.


Sidegrinder

Qvintett LARGE leveres med integrerte sidegrinder som fungerer som sengeside når de er nedfelt. Sidegrinden senkes så langt ned at den ikke er i veien når bruker skal sitte på sengekanten. Sidegrindene har en pålitelig og kraftig konstruksjon og har automatisk sikkerhetslås. Standard grinder passer til en madrass på opp til 14 cm. Alternative grinder er tilgjengelig som tilbehør.

Liggeflate

Sengens liggeflate er utstyrt med fjærende laminatpiler. Laminatpilene har en dokumentert trykkreduserende effekt på 16% i sittende stilling, sammenliknet med sengebunner i aluminium eller stål. Liggeflaten kan forlenges med inntil 20 cm.

SPESIFIKASJONER	105x200 cm	120x200 cm
Maks. brukervekt	250 kg	250 kg
SWL (Safe Working Load)	285 kg	285 kg
Yttermål, bredde	117 cm	132 cm
Yttermål, lengde	214 cm	214 cm
Madrassmål, bredde	105 cm	120 cm
Madrassmål, lengde	200 cm	200 cm
Sengebunn	4 delt	4 delt
Ryggdel, lengde	77 cm	77 cm
Setedel, lengde	20 cm	20 cm
Lårdel, lengde	37 cm	37 cm
Fotdel, lengde	56 cm	56 cm
Arbeidsområde (uten madrass)	33-82 cm	33-82 cm
Frigang under løfter	ca. 17 cm	ca. 17 cm
Hjuldiameter	100 mm	100 mm
Låsning av hjul	Sentralbrems retningssperre	Sentralbrems retningssperre
Vekt sengeøfter	57 kg	57 kg
Vekt sengebunn (eks. lår- og fotdel)	28 kg	33 kg
Vekt sengebunn lår- og fotdel	11 kg	12 kg
Totalvekt	96 kg	102 kg
Utførelse sengeramme	Lys bøk	Lys bøk
Lydnivå	47 dB	47 dB

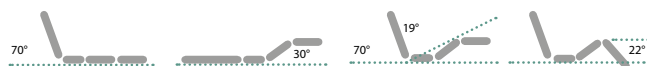

Planleie - ett trykk

Qvintett LARGE kan med ett enkelt trykk settes i planleie, samt sitteleie, uavhengig av utgangsleie eller hvilke funksjoner som er innstilt fra før. Det er ofte svært viktig for brukeren av sengen å kunne sikre at sengen er i planleie.

Arbeidsredskap

Qvintett LARGE er et stabilt og godt arbeidsredskap for pleiepersonalet, samtidig som sengen gir brukere som ligger i sengen god liggekomfort og gode stillinger. Et stort utvalg tilbehør for økt aktivisering av bruker i og rundt sengen gir en bedre pleiehverdag. Qvintett LARGE er produsert i henhold til sengenorm 60601-2-52.