

Forbedre standarden på den manuelle rengjøringen

Sekusept® MultiEnzyme rengjøringsmiddel med
Sekusept® Doseringssystem



Sekusept® Multienzyme

Enzymbasert rengjøringsmiddel til medisinsk utstyr

HVORFOR SEKUSEPT® MULTIENZYME?

Sekusept Multienzyme kombinerer en unik blanding av tensider og enzymer for utmerket rengjørings effekt:

- ▲ Proteas, lipas amylas enzymer som bryter ned proteiner, fett och stivelse
- ▲ Lavtskummende formel for enkel skylling
- ▲ CE merket produkt og formel tilpasset medisinteknisk utstyr
- ▲ Blå farge for å indikere at produktet er dosert
- ▲ Parfymefri
- ▲ pH nøytral, brukervennlig og kompatibel med alle typer medisinsk utstyr
- ▲ Valg av doseringsutstyr gir korrekt dosering for alle applikasjoner
- ▲ Velg mellom 6 l kanne eller 2 l flaske



Sekusept® MultiEnzyme finnes i to pakkingsstørrelser med flere ulike typer doseringsutstyr for å øke brukervennligheten.

BRUKSOMRÅDE

Til manuell forvask av kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr inklusiv fleksible endoskoper, også egnet til ultralydsbad.

**“ENZYMBASERTE
RENGJØRINGSMIDLER
HAR EVNEN TIL Å
LØSE OPP SLIM OG
ANNET BIOLOGISK
MATERIALE”¹**



Korrekt dosering med ett trykk

SEKUSEPT® DOSERINGSSYSTEM

Sekusept doseringssystem til manuell rengjøring bidrar til å oppnå riktig konsentrasjon hver gang med minimal innsats


HÅNTERINGSINSTRUKSJON

Med vårt system kan du innhente eksakte data til hjelp ved validering av rengjøringsprosessen.

- ▲ Data kan enkelt lastes ned via USB port på kontrollen
- ▲ Service- og innstillingsdata er også tilgjengelig

*"Rengjøringsløsningen skal kasseres etter bruk."*¹³

**"EN VALIDERT
METODE FOR
DOSERING AV
RENGJØRINGSMIDDEL
ER ET KRAV"¹²**

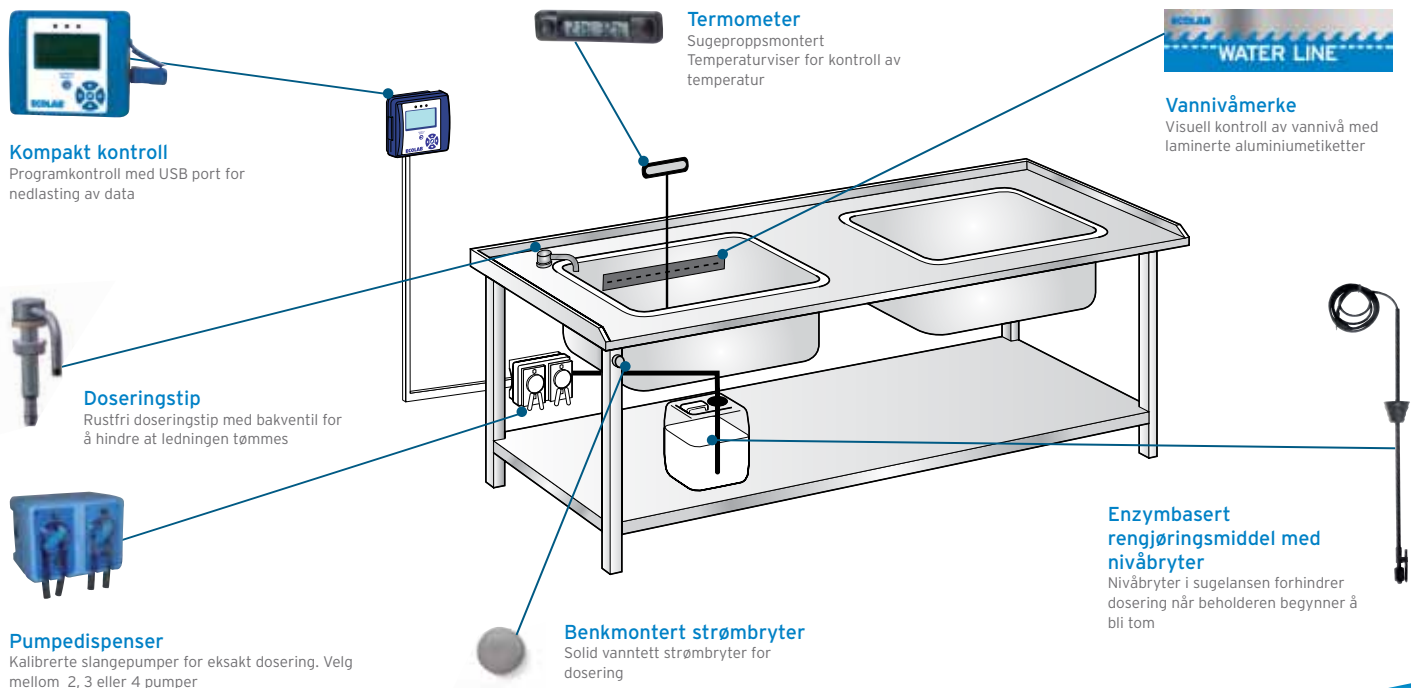

INSTALLASJON

Vår omfattende installasjonsservice garanterer maksimal rengjøringseffektivitet med minimal forstyrrelse for driften.

Vi tilbyr:

- ▲ Gjennomgang før installasjon og modifisering av systemet for tilpasning til deres behov
- ▲ Komplet installasjon av egnet utstyr med minimal forstyrrelse for driften
- ▲ Fortløpende støtte, opplæring og rådgivning
- ▲ Årlig service og kalibrering gir eksakt dosering og kalibrerings-sertifikat for full sporbarhet

Produktvalg & bestillingsinformasjon

	ALTERNATIV 1: AUTOMATISK DOSERING	ALTERNATIV 2: MANUELL
STERILSENTRAL & ENDOSKOPIENHET	6 l kanne og Sekusept Doseringssystem 1+5	6 l kanne og pumpe 1+3
ENDOSKOPIMOTTAK	6 l kanne og Pulsar veggpumpe 1+6	2 l flaske og pumpe 2+4
KLINIKKER OG MINDRE AVDELINGER	6 l kanne og Pulsar veggpumpe 1+6	2 l flaske og pumpe 2+4

PRODUKT	ENHET	LEVFORP	ART NR
1 Sekusept MultiEnzyme	6 l	1x6	3046640
2 Sekusept MultiEnzyme	2 l	4x2	3046620
3 20 ml pumpedispenser til 6 l kanne	20ml pumpe	1	10018654
4 10 ml pumpedispenser til 2 l flaske	10ml pumpe	4	10016760
Stativ til 6 l kanne	1	1	-



INNEHOLDER

Proteas, Amylas, Lipas, Tensider, Korrosjonsinhibitor, Løsningsmiddel, Emulgeringsmiddel

For ytterligere informasjon: www.puls-norge.no

KONTAKT VÅR LOKALE DISTRIBUTØR PULS AS FOR MER INFORMASJON: +47 23 32 30 00

REFERANSER

- Guidelines for Decontamination of Equipment for Gastrointestinal Endoscopy, BSG 2008
- Standards and Practice for Medical Device Decontamination, ID Sc 2007
- Decontamination Standards for Flexible Endoscopes, National Endoscopy Programme 2008

MARKEDSFØRES AV

Puls a.s.
Strømsveien 344
1081 Oslo
+47 23 32 30 00
www.puls-norge.no

PRODUSERT AV

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173 599 0



ECOLAB®